

GENAU

МАССАЖЕР ДЛЯ КОЛЕНА **GENAU KNEE RELIEF PRO**
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

Благодарим Вас за приобретение массажера Genau. Данный массажер позволяет выполнять массаж колена в разных техниках, способствуя профилактике и лечению многих заболеваний. Мы надеемся, что Ваш опыт использования будет наилучшим и покупка будет способствовать улучшению Вашего здоровья, самочувствия и настроения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

Прежде чем приступить к использованию массажного устройства, внимательно прочтите инструкцию. Сохраните инструкцию пока используете массажер!

- Массажное устройство соответствует признанным техническим принципам и новейшим правилам техники безопасности.
- Не мочите, не протыкайте булавками или другими острыми предметами, никогда не снимайте чехол изделия.
- Этот предмет НЕ ИГРУШКА. Необходим строгий надзор, когда данное устройство используется детьми или людьми с ограниченными возможностями, неврологическими или психическими отклонениями, на них или рядом с ними.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети.
- Любой ремонт изделия может выполняться только авторизованным квалифицированным персоналом. Неправильное использование или ремонт лицами, не рекомендованными производителем недопустимы из соображений безопасности и приводят к потере гарантии.
- Никогда не прикасайтесь к вилке питания и другим механическим деталям мокрыми руками.
- Избегайте контакта устройства с водой, высокими температурами и прямыми солнечными лучами.
- Не используйте поврежденные кабели, вилки или незакрепленные розетки.
- Никогда не включайте под одеялами, поскольку вентиляционное отверстие может быть заблокировано.
- Если вилки или шнуры повреждены, они должны быть заменены производителем, представителем сервисной службы или квалифицированным персоналом.
- В случае неисправности немедленно отключите массажер от электросети.
- Не используйте, если у вас есть кожные заболевания, открытые раны, опухшие или воспаленные

участки кожи. При наличии других заболеваний в зоне использования предварительно проконсультируйтесь с врачом.

- Не используйте это устройство во время вождения.
- Не используйте во время сна.
- Не используйте для детей, людей с инвалидностью или лиц, нечувствительных к теплу.
- Слишком длительное применение может привести к ожогам кожи.
- Чтобы избежать чрезмерной стимуляции мышц и нервов, рекомендуемое время массажа не должно превышать 15 минут за один раз.
- От любого массажа, даже ручного, следует воздержаться во время беременности или при наличии одной

или нескольких из следующих жалоб в зоне массажа: недавние травмы, тромботические заболевания, все виды воспалений и отеков, а также рак. Перед проведением массажа для лечения недомоганий и болезней рекомендуется проконсультироваться с врачом.

- Если вы используете электрические медицинские устройства, например, кардиостимуляторы, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем приступить к массажу.
- Упаковочный материал не следует использовать в качестве игрушки. Утилизируйте сразу после вскрытия.
- Массажер не предназначен для использования в медицинских целях.

Внимание!

Несоблюдение приведенных выше инструкций может считаться неправильным использованием изделия и может привести к серьезным травмам или ожогам.

ВОЗМОЖНОСТИ МАССАЖЕРА

- Двухсекционный массажный дизайн;
- Полный воздушно-компрессионный массаж;
- Тепловая терапия суставов;
- Физиотерапевтический массаж с внешними электродами;
- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор;
- Внешняя электротерапия.

Массажер Genau Knee Relief PRO может также использоваться для плеч и локтей при условии комфортной посадки. При наличии неприятных ощущений, немедленно прекратить массаж.



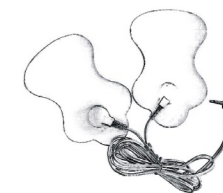


СХЕМА УСТРОЙСТВА


Внешний корпус

Панель управления

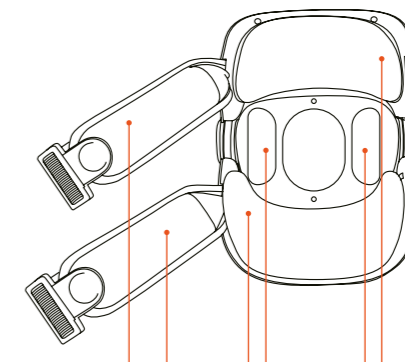

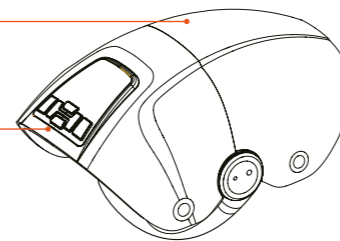

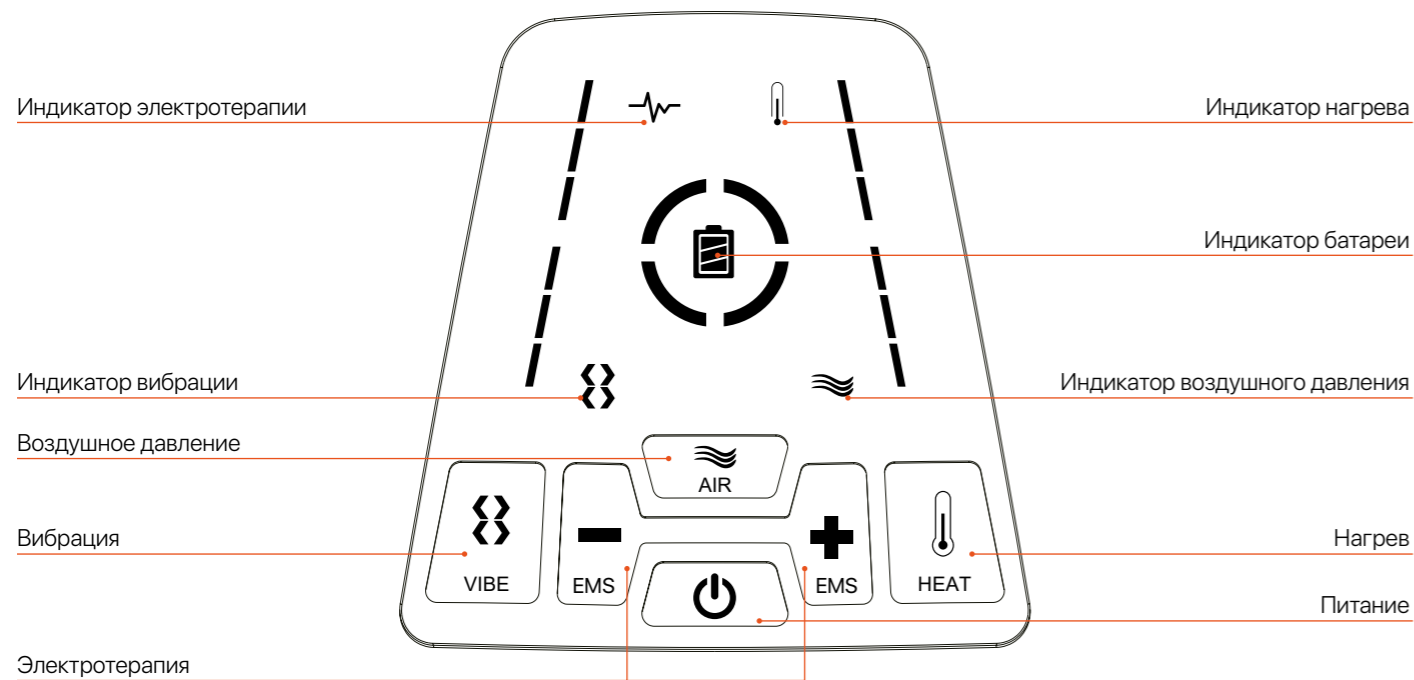

6 воздушных подушек для полного обволакивающего массажа

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИИ КЛАВИШ

Обозначение	Функция	Описание функции
	Питание	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. По умолчанию включаются функции воздушного давления и нагрева. Включённый режим можно переключать нажатием кнопки: стандартное рабочее время составляет 15 минут. Режимы работы: Режим 1: Только воздушное давление (прессотерапия); Режим 2: Только электротерапия; Режим 3: Электротерапия + воздушное давление (прессотерапия). Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, при этом изменится индикаторный свет.
	Нагрев	<p>Функция нагрева включается по умолчанию.</p> <p>Доступно 3 уровня интенсивности (низкий – средний – высокий). Первое и второе нажатие увеличивает мощность нагрева, третье нажатие выключает функцию. Индикаторный свет меняется в зависимости от выбранного уровня.</p>
	Воздушное давление	<p>Функция воздушного давления (прессотерапии) включается по умолчанию на низкой интенсивности.</p> <p>Доступно 3 уровня интенсивности (низкий – средний – высокий). Первое и второе нажатие увеличивает давление, третье нажатие выключает функцию. Индикаторный свет меняется в зависимости от выбранного уровня.</p>

Обозначение	Функция	Описание функции
	Вибрация	Функция вибрации включается по умолчанию на низкой интенсивности. Доступно 3 уровня интенсивности (низкий – средний – высокий). Первое и второе нажатие увеличивает мощность, третье нажатие выключает функцию. Индикаторный свет меняется в зависимости от выбранного уровня.
	Электро-терапия	Включение режима электротерапии доступно при активации режима 2 или 3.
	Электро-терапия +	В рабочем режиме электротерапии нажмите эту кнопку, чтобы увеличить интенсивность электростимуляции, индикаторный свет изменится.
	Электро-терапия –	В рабочем режиме электротерапии нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить интенсивность электростимуляции, индикаторный свет изменится.

- При включении и выключении устройства будет звучать короткий звуковой сигнал. При нажатии кнопки также будет короткий звуковой сигнал, а при обнаружении ошибки прозвучат два коротких сигнала.
- При низком напряжении индикаторный свет будет отображать уровень заряда. Когда устройство почти разрядится, последний индикатор начнёт мигать.
- Во время работы устройство автоматически выключится при зарядке. Красный свет указывает на процесс зарядки, а зелёный – на полную зарядку.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

1. Используйте адаптер DC5V и подключите зарядный кабель к адаптеру через USB-разъем, а другой конец – к разъему питания устройства.
 - Если значок батареи на дисплее горит красным, это означает, что идет зарядка.
 - Когда зарядка завершена, индикатор батареи изменится с красного на зеленый.
2. При использовании устройства, если красный индикатор батареи начинает мигать, следует немедленно прекратить работу и подключить устройство к зарядке.
3. При зарядке используйте адаптер DC5V 2A или более мощный для обеспечения стабильной работы.
4. Предупреждение о литиевой батарее:
 - Устройство содержит встроенную литиевую батарею. Батареи должны быть переработаны или утилизированы в соответствии с нормативными требованиями.
 - Для переработки или утилизации батареи свяжитесь с местными органами по обращению с отходами.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования устройства обязательно отключите его от сети и дайте ему остыть перед очисткой для обеспечения безопасности.
- После использования протрите устройство влажной тканью, чтобы удалить пыль и загрязнения.
- Не используйте агрессивные чистящие средства, такие как бензин или растворители, для очистки устройства.
- Не протирайте панель управления влажной тканью, так как это может привести к поломке. Для очистки панели управления используйте только сухую ткань.
- Если изделие не используется в течение длительного времени, протрите его, упакуйте и храните в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать воздействия влаги и продлить срок службы устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- В этом разделе приведены наиболее часто встречающиеся проблемы при использовании данного устройства.
- Отключите питание устройства и выньте вилку из розетки.
- Оставьте устройство выключенным на 60 минут.
- Вставьте вилку в розетку и включите устройство.
- Если проблема сохраняется, обратитесь в наш центр обслуживания клиентов.
- Если возникшая проблема не указана в списке, выполните следующие действия.

Проблема	Возможная причина	Действия
Устройство выключилось после 15 минут работы.	Таймер завершил работу программы.	Если вы хотите продолжить массаж, включите устройство снова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочий ток	2А
Вес	1,2 кг
Входное напряжение	АС 100~240V 50/60Hz
Номинальная мощность	10 Вт
Время работы таймера	15 минут
Максимальный рост и вес пользователя	не ограничен
Срок эксплуатации устройства	не ограничен
Гарантия	1 год

Производитель: Shenzhen Forrest Health Technology Co., Ltd
Room 201, Building 1 No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, ShenZhen, China

GENAU KNEE RELIEF PRO TIEE MASSAJEPI ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ

