

# МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ

**GENAU LILA**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

Компания GENAU благодарит Вас за доверие и выбор массажера для шеи и плеч Genau Lila. Мы надеемся, он станет вашим надежным помощником в ежедневном поддержании здоровья и хорошего настроения.

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием.  
Сохраняйте инструкцию на время использования массажера.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### Внимание!

Для безопасной и правильной эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Пользователь несет ответственность за любые последствия, вызванные неправильным использованием или несоблюдением инструкций.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте массажер во время вождения.
- Не применяйте его сразу после операции или при наличии кожных воспалений, повреждений, отеков.
- Беременные женщины и женщины в период менструации не должны использовать массажер.
- Дети до 6 лет не должны использовать массажер.
- Дети 6-12 лет могут пользоваться массажером только под присмотром взрослых.

### **Не используйте, если у вас:**

- Сердечно-сосудистые заболевания, кожные заболевания, злокачественные опухоли.
- Проблемы с кровообращением (например, склонность к кровотечениям, остеопороз, инсульт).
- Медлительные рефлексы, физические или психические расстройства (использование только по рекомендации врача).

## **ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ**

### **ЧИСТКА**

- Перед чисткой выключите устройство.
- Можно промыть под водой, затем протереть мягкой хлопковой тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (например, ацетон, бензин).

### **ХРАНЕНИЕ**

- При длительном хранении заряжайте устройство раз в 3 месяца.
- При хранении используйте защитную силиконовую заглушку от пыли.
- Не кладите устройство на землю.

- Храните массажер в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и коррозионных газов.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА**


- Устройство не утилизируется вместе с бытовыми отходами.
- Следуйте местным экологическим нормам по утилизации аккумуляторных батарей


## ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ

Силиконовая ручка

Вкл/Выкл

Массажная головка

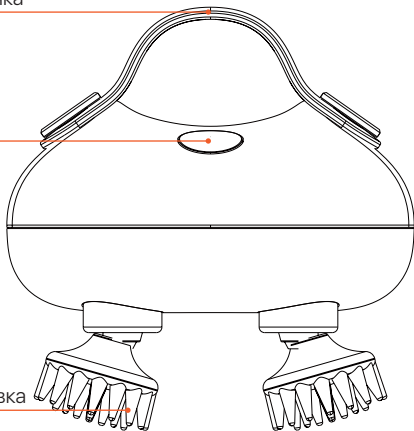

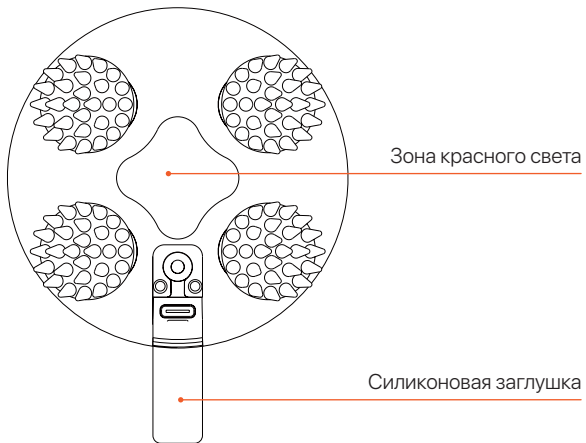

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Подключите зарядный кабель к устройству, а затем к зарядному адаптеру.
- Во время зарядки красный индикатор батареи горит, после полной зарядки загорается зеленый индикатор.
- Во время зарядки не используйте устройство. Если оно находится в рабочем режиме во время подключения к зарядке, система самозащиты отключит его автоматически.
- Время зарядки: 2-3 часа. После полной зарядки устройство можно использовать 6-8 раз, если каждая сессия длится 10 минут.
- Используйте стандартный зарядный адаптер 5V.
- Во время зарядки массаж и нагрев отключаются автоматически.
- Красный индикатор мигает, пока зарядка не завершится.
- После полной зарядки индикатор горит белым светом.


## ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО ЗАРЯДА

- Во время работы красный индикатор мигает, сигнализируя о низком заряде.
- Если заряд очень низкий, массажер отключится через 3 секунды, остановив работу мотора и нагрева.

### Внимание!

Если массажер поврежден или произошла механическая поломка, прекратите использование устройства. Немедленно обратитесь в сервисный центр.

## ФУНКЦИИ КЛАВИШ

Обозначение	Функция
	Включить/ Выключить
Описание функции	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Длительное нажатие (1,5 сек) включает устройство (по умолчанию активируется медленный режим, время работы – 10 минут).</li><li>• Длительное нажатие (1,5 сек) выключает устройство.</li><li>• Короткое нажатие кнопки ON/OFF меняет режим массажа: <b>Режим 1:</b> Медленный массаж (фиолетовый индикатор). <b>Режим 2:</b> Быстрый массаж (синий индикатор). <b>Режим 3:</b> Автоматическое чередование медленного и быстрого режима (желтый индикатор).</li><li>• Двойное нажатие включает или выключает <b>функцию красного света</b>.</li></ul>	

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Основные причины	Способ устранения
Не включается	Батарея разряжена	Проверьте, заряжено ли устройство.
Слабая интенсивность массажа		Если необходимо, подключите массажер к зарядному устройству

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название продукта	Массажер для головы
Модель	Genau Lila
Номинальное напряжение	5В
Ёмкость литиевой батареи	800 мАч
Таймер	10 минут
Время зарядки	2-3 часа
Уровень водонепроницаемости	IPX7
Максимальный вес, рост	Не ограничен
Срок эксплуатации	Не ограничен
Гарантия	1 год

Производитель: Xiamen Healthpal Electronic Co., Ltd.  
Add: 4F, No. 1019, Wanjiachun Road, Torch High-Tech Zone (Xiang'an)  
Industrial Park, Xiamen